

# E

## Lámpara UV Spot móvil



### PRECAUCIÓN:

**¡Obsérvense las instrucciones de servicio!**

**Tanto la instalación de accesorios como la ampliación del equipo incorporando componentes adicionales deberá efectuarse de acuerdo a las pautas facilitadas en las instrucciones de servicio.**

La lámpara UV Spot móvil está disponible en dos variantes de equipamiento:

- Equipo estándar **Spot 30** compuesto de: cuerpo de luminaria [3], dos pies de apoyo desmontables [10] (además de 2 escuadras de sujeción para el modelo KS 9 a fin de ser utilizado como equipo colgante), protector de tubo fluorescente [4], cable de conexión con enchufe de aparato frío [8] y conector UV [9].
- Equipo colgante **Spot K** compuesto de: cuerpo de luminaria [14] y protector de tubo fluorescente [13] con cable de conexión para el conector UV [11]. Para utilizar el equipo colgante se necesita el kit de suspensión disponible como accesorio adicional. (KS 9 - n° ref.: 50073943 / KS 12 - KS 18 - n° ref.: 50073944)

### Montaje y puesta en marcha

1. El protector de tubo fluorescente [4] está fijado con un tornillo de cabeza moleteada en cada extremo del cuerpo de luminaria [3]. Extraer los tornillos y quitar el protector de tubo fluorescente.
2. Instalación de los equipos:
  - En el equipo de pie (**Spot 30**), fijar los dos pies de apoyo [10] mediante los tornillos de cabeza moleteada en los extremos izquierdo y derecho del cuerpo de luminaria. Colocar el equipo de pie en el centro del espacio útil. Conectar el enchufe de aparato frío [8] a la caja de enchufe [7] situada en el cuerpo de luminaria. Conectar el conector UV a uno de los dos adaptadores UV internos.
  - El modelo KS 9 ofrece la posibilidad de utilizar la lámpara UV en combinación con un kit de suspensión. Para ello, se deberán atornillar las escuadras de sujeción [6] en lugar de los pies de apoyo.
  - Fijar el equipo colgante (**Spot K**) a través de los dos ganchos [2] al kit de suspensión [1]. Conectar el conector UV [11] a uno de los dos adaptadores UV internos.



### NOTA – ¡Radiación ultravioleta


**Antes de conectar y activar la lámpara UV Spot móvil, deberán retirarse del espacio útil todos los medios auxiliares y muestras.**




### PRECAUCIÓN – ¡Peligro de quemaduras!

**Durante el proceso de desinfección, la lámpara UV alcanza temperaturas muy elevadas. Antes de desmontar la lámpara UV Spot móvil, ¡esperar hasta que el cuerpo de luminaria se haya enfriado lo suficiente!**

### Spot 30

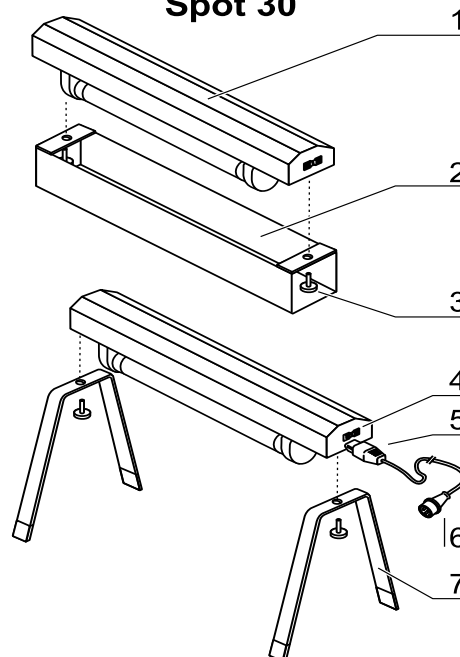

### Spot K

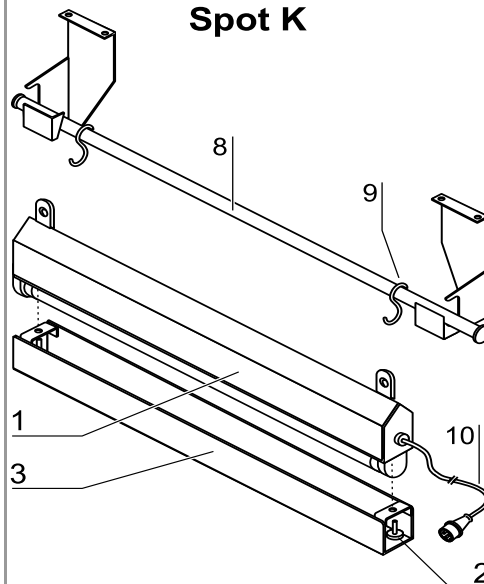

## E

## Lámpara UV Spot móvil

3. Puesta fuera de servicio:  
Desconectar el cable de alimentación. En el caso del equipo de pie, desatornillar los pies de apoyo. Fijar el protector de tubo fluorescente al cuerpo de luminaria mediante los tornillos de cabeza moleteada.

## Recambios

| Descripción                                  | Nºs de referencia para pedidos: |          |          |          |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|
|                                              | SPOT 30                         |          | SPOT K   |          |
|                                              | 120 V                           | 230 V    | 120 V    | 230 V    |
| Portalámparas (con acoplamiento de clavijas) | 50043771                        | 50043771 | 50043771 | 50043771 |
| Cebador UV lateral 2 x 18 W 230 V            |                                 | 50048679 |          |          |
| Cebador UV lateral 2 x 15 W 120 V            | 50060299                        |          |          |          |
| Cebador para lámpara UVC, 230 V              |                                 |          |          | 50048679 |
| Cebador para lámpara UVC, 120 V              |                                 |          | 50060299 |          |
| Lámp. esteriliz. UVC 15 W lg 435 mm 230 V    |                                 | 50048537 |          | 50048537 |
| Lámp. esteriliz. UVC 15 W lg 435 mm 120 V    | 50060298                        |          | 50060298 |          |
| Cable con enchufe hembra                     | 50048531                        | 50048531 | 50048531 | 50048531 |
| Pie de apoyo                                 | 50048676                        | 50048676 | 50048676 | 50048676 |
| Tornillo de cabeza moleteada                 | 50049781                        | 50049781 | 50049781 | 50049781 |
| Instrucciones de servicio                    | 50077503                        | 50077503 | 50077503 | 50077503 |

## Datos técnicos

| Descripción           | Unidad  | SPOT 30 |     | SPOT K |     |
|-----------------------|---------|---------|-----|--------|-----|
| Ancho                 | mm      | 80      |     | 60     |     |
| Alto                  | mm      | 115     |     | 170    |     |
| Alto con pie de apoyo | mm      | 310     |     | 365    |     |
| Largo                 | mm      | 520     |     | 995    |     |
| peso                  | kg      | 2       |     | 4,5    |     |
|                       |         |         |     |        |     |
| Datos eléctricos      |         |         |     |        |     |
| Tensión asignada      | Voltius | 120     | 230 | 120    | 230 |
| Frecuencia asignada   | Hz      | 60      | 50  | 60     | 50  |
| Wellenlänge           | nm      | 254     | 254 | 245    | 245 |